

medi



Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.

Инструкция по использованию

medi Shoulder sling («МЕДИ ШОЛДЕР СЛИНГ»)

Бандаж для верхней конечности иммобилизирующий с дополнительным поясом.
Регистрационное удостоверение № ФЗС 2011/09661 от 21 апреля 2011 года,
срок действия не ограничен

Уважаемый покупатель,

спасибо, что Вы выбрали бандаж medi Shoulder sling. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию и убедитесь, что Вы умеете правильно надевать изделие и знаете правила его эксплуатации.

Показания

Послеоперационный период.
Иммобилизация плеча.


Принцип действия

Разгрузка плечевого и локтевого суставов и плечевой кости с возможностью дополнительной фиксации поясом.

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Инструкция по надеванию

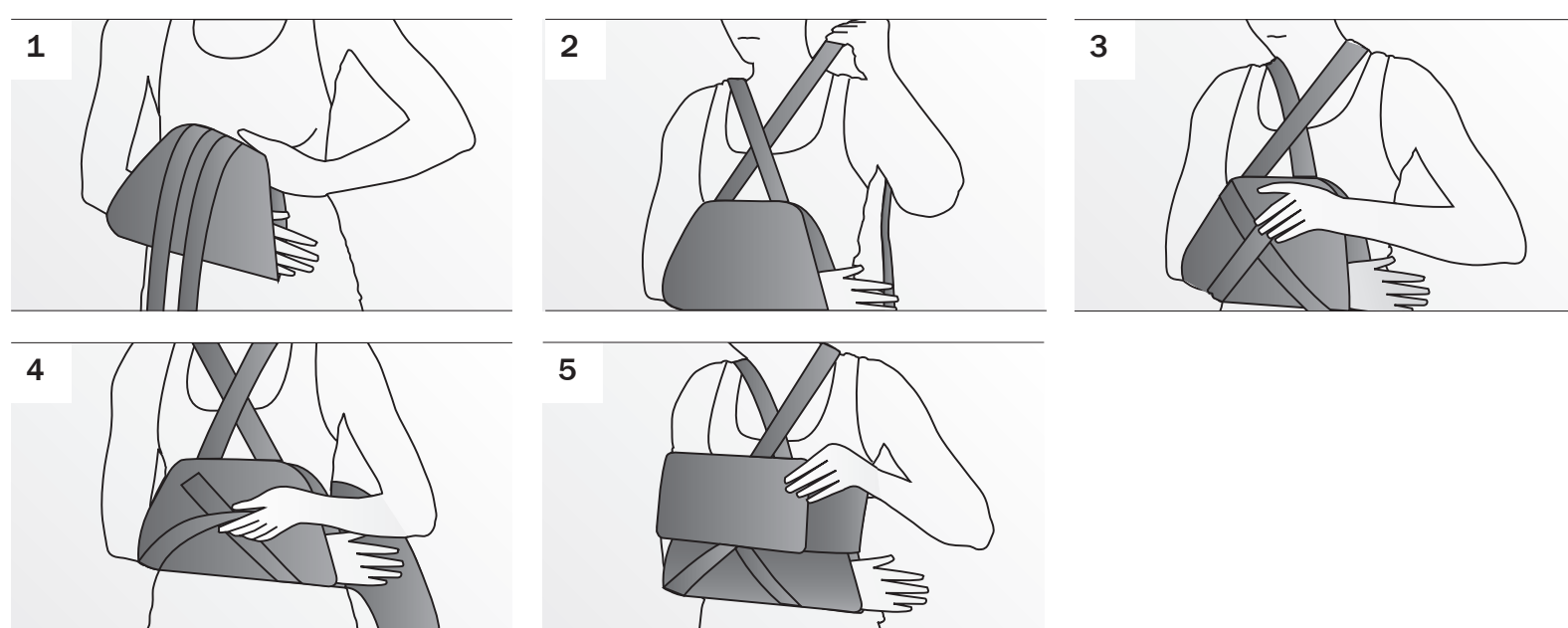

- Откройте все застежки-липучки.
- Вложите руку травмированного плеча в повязку (см. рис. 1).
- Обмотайте оба плечевых ремня крест-накрест вокруг верхней части тела и положите их концы на плечо (см. рис. 2).
- Возьмите конец одного ремня и прикрепите его к повязке (см. рис. 3).
- Прикрепите к повязке конец второго ремня.
- При необходимости для улучшения фиксации (особенно в ночное время), можно дополнительно наложить широкий ремень. Прикрепите его сзади (на локте) к повязке и наложите его на живот, а затем на спину. При этом рука должна двигаться свободно (см. рис. 5).

Важная информация

Данное изделие предназначено только для индивидуального применения. В случае использования изделия более чем одним пациентом гарантии производителя утрачивают силу. Если при использовании изделия возникли боли или неприятные ощущения, пожалуйста, незамедлительно обратитесь к Вашему лечащему врачу. Не используйте изделие при наличии незакрытых асептическими повязками ран. Применяйте изделие только согласно рекомендациям лечащего врача.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев с момента продажи при условии использования изделия по назначению.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате: а) каких-либо происшествий, неправильного использования, экстремальных условий эксплуатации или неправильного хранения; б) воздействия чрезмерных усилий; в) непредусмотренного производителем использования или внесения изменений в конструкцию.

Срок годности изделия

Срок годности не ограничен.

Инструкция по уходу

Стирайте изделие вручную в прохладной воде (30 °С) с использованием обычного мыла. Тщательно прополощите: остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать ускоренному износу материала. Не отжимайте. Сушите изделие на воздухе. Не гладьте. Изделие можно использовать как в пресной, так и в соленой воде. После использования в воде тщательно прополощите изделие и высушите на воздухе. Не выводите пятна с помощью бензола и других химикатов-детергентов.



Состав

Тканевая основа:

полиэстер 82%, эластан 18%

Наполнитель:

полиамид, пенополиэтилен, полиэстер

Ремни и крепления:

полиэстер, полиамид, нейлон

Цвет

Голубой (blue)

Инструкция по хранению

Храните изделие в сухом прохладном месте вдали от прямого солнечного света.

Инструкция по утилизации

Изделие утилизируют вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!

Все претензии и пожелания принимает ООО «МЕДИ РУС» - импортер и уполномоченный представитель производителя в России по адресу:
121609, Москва, ул. Осенняя, 4, корп. 1